

Androstar® Plus

Ebersamenverdünner mit antibiotischem Zusatz

Boar semen extender with antibiotic supplement


Diluyente para semen porcino con suplemento antibiótico

Среда для разбавления спермы хряков
с антибактериальной добавкой

47 g = 1 l

47 г = 1 л

Ref. 13531/4001

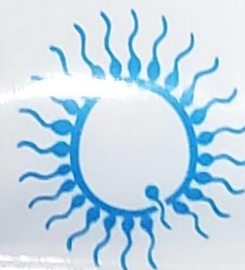

minitube

Minitüb GmbH

Hauptstr. 41 | 84184 Tiefenbach | Germany

Phone: +49 (0)8709 9229 0

E-mail: minitube@minitube.de | Web: www.minitube.com

LONG TERM

LONG TERM

Lagerung: Dunkel und trocken unter +15°C lagern.

Achtung: Nicht in Reichweite von Kindern lagern. Nicht für Konsum oder Behandlung von Mensch und Tier. Nicht für Injektionen verwenden.

Storage: Store in a dry and dark environment below +15°C.

Warning: Keep out of reach of children. Not for human or animal consumption or drug or clinical use. Not for injection.

Almacenamiento: Mantenga en un lugar seco y oscuro a temperaturas inferiores a +15°C.

Atención: Mantener fuera del alcance de los niños. No apto para el consumo de seres humanos o animales, uso fármaco o clínico. No apto para inyecciones.

Хранение: Храните в сухом и темном месте при температуре ниже +15°C.

Внимание: Храните в недоступном для детей месте. Продукт непригоден для потребления или лечения людей и животных. Не используйте для инъекций.

30.11.2022 22050114702

Transport <+25°C, Lagerung <+15°C

Transport <+25°C, Storage <+15°C

Transportar <+25°C, Almacenar <+15°C

Транспортировка <+25°C, Хранение <+15°C



LOT

MADE IN GERMANY

Anwendung: Beutelinhalt in 1 Liter sterilem, destilliertem Wasser mit einer Temperatur von +32°C bis +38°C auflösen. Den pH-Wert für 20 Minuten stabilisieren lassen. Vor Verdünnung auf Temperaturgleichheit zwischen Verdünnung und Samen achten. Lagerung und Versand des verdünnten Samens bei +17°C. Vor der Motilitätsbeurteilung die Samenprobe für mindestens 20 Minuten auf +37°C erwärmen.

Application: Dissolve content of bag in 1 liter of sterile, distilled water at +32°C to +38°C. Allow the pH to stabilize for 20 minutes. Ensure that boar semen and extender are adjusted to the same temperature before dilution. Storage and shipment of the extended semen at +17°C. Prior to motility evaluation, warm sample of extended semen up to +37°C for a minimum of 20 minutes.

Aplicación: Disolver el contenido de la bolsa en 1 litro de agua esterilizada y destilada, a una temperatura de +32°C a +38°C. Dejar estabilizar el valor pH por 20 minutos. Antes de proceder a la dilución, asegúrese que el semen y el diluyente estén ajustados a la misma temperatura. Almacenaje y transporte del semen diluido a +17°C. Antes de evaluar motilidad, mantenga la muestra de semen diluido a una temperatura de +37°C por un mínimo de 20 minutos.

Применение: Растворите содержимое упаковки в 1 литре стерильной дистиллированной воды температурой от +32°C до +38°C. Оставьте раствор на 20 минут для стабилизации показателя pH. Перед разбавлением сперма и готовый разбавитель должны иметь одинаковую температуру. Хранение и транспортировку разбавленной спермы осуществляйте при температуре +17°C. Перед началом анализа подогрейте образец разбавленной спермы до +37°C в течение 20 минут.